

Jednorazowe skalpele wysuwane - sterylne

Plastikowa rękojeść z ostrzem ze stali nierdzewnej, pakowane pojedynczo

Rozmiar ostrza	Kod produktu	Ilość w op.	Rozmiar ostrza	Kod produktu	Ilość w op.
10 skalpeli pakowanych pojedynczo			25 skalpeli pakowanych pojedynczo		
10	4901	10 szt.	10	3901	25 szt.
10A	4902	10 szt.	10A	3902	25 szt.
11P	4991	10 szt.	11P	3991	25 szt.
12	4904	10 szt.	12	3904	25 szt.
14	4919	10 szt.	14	3919	25 szt.
15	4905	10 szt.	15	3905	25 szt.
15C	4921	10 szt.	15C	3921	25 szt.
20	4906	10 szt.	20	3906	25 szt.
21	4907	10 szt.	21	3907	25 szt.
22	4908	10 szt.	22	3908	25 szt.
23	4910	10 szt.	23	3910	25 szt.
24	4911	10 szt.	24	3911	25 szt.
25A	4915	10 szt.	25A	3915	25 szt.
Stitch Cutter (ostrze do szwów)	4926	10 szt.	Stitch Cutter (ostrze do szwów)	3926	25 szt.
10R	4990	10 szt.	10R	3990	25 szt.

Jednorazowe skalpele wysuwane - niesterylne

Plastikowa rękojeść z ostrzem ze stali nierdzewnej, pakowane zbiorczo

Rozmiar ostrza	Kod produktu	Ilość w op.	Rozmiar ostrza	Kod produktu	Ilość w op.
500 skalpeli pakowanych zbiorczo			500 skalpeli pakowanych zbiorczo		
10	4001	500 szt.	21	4007	500 szt.
10A	4002	500 szt.	22	4008	500 szt.
11P	4091	500 szt.	23	4010	500 szt.
12	4004	500 szt.	24	4011	500 szt.
14	4019	500 szt.	25A	4015	500 szt.
15	4005	500 szt.	Stitch Cutter (ostrze do szwów)	4026	500 szt.
15C	4021	500 szt.			
20	4006	500 szt.	10R	4090	500 szt.

Logo Swann-Morton jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do grupy Swann-Morton Limited. Przedstawione produkty powinny być używane wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny, a ich niewłaściwe wykorzystanie może spowodować urazy lub zranienia. Dane i opisy zawarte w niniejszym prospekcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy przedstawionych produktów przeszli odpowiednie szkolenia przygotowujące do korzystania z nich. Swann-Morton Limited oraz JK Surgical Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.

JK SURGICAL
PRZEDSTAWICIEL FIRMY Swann-Morton®

JK Surgical Sp. z o.o. — wyłączny przedstawiciel Swann-Morton w Polsce
ul. Żlebowa 8, 60-115 Poznań, NIP PL7790045100, REGON 630178983
tel./fax: +48 61 867 97 81, biuro@jksurgical.pl, www.jksurgical.pl

Bezpieczeństwo w zasięgu ręki


Bezpieczne skalpele
wysuwane marki

Swann-Morton®




Poszerzona gama wysuwanych skalpeli Swann-Morton stworzona z myślą o najnowszych normach bezpieczeństwa.


Dyrektywa Rady 2010/32/UE oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. zmierzają do zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej poprzez zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami medycznymi. Zgodnie z przyjętymi przepisami, pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom dostęp do narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony przed przypadkowymi zakłuceniami. Wymagania te spełnia gama bezpiecznych skalpeli wysuwanych Swann-Morton, zawierająca teraz aż 15 najbardziej popularnych rozmiarów ostrzy, w tym ostrze do ściągania szwów Stitch Cutter.

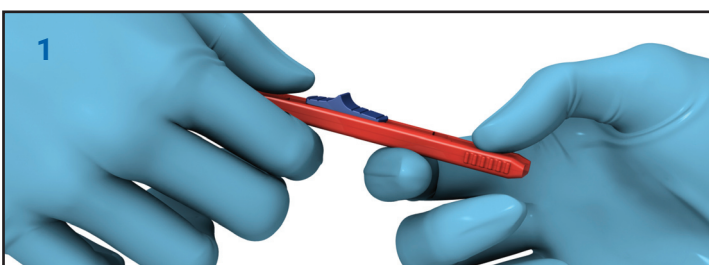


1 Wyraźnie widoczna, czerwona rękojeść całkowicie osłania ostrze i blokuje je przed przypadkowym wysunięciem, tym samym zapewniając użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo podczas przekazywania skalpela z ręk do rąk.

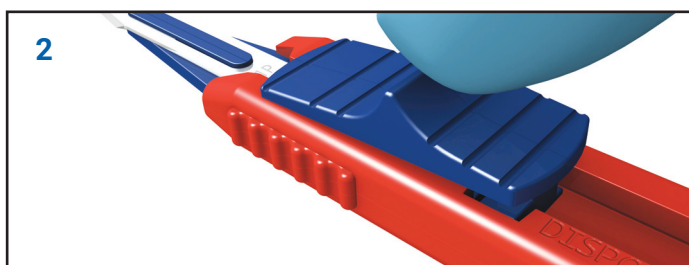

2 Wysunięcie ostrza następuje poprzez naciśnięcie suwaka, przesunięcie go do przodu i zablokowanie ostrza w pozycji wysuniętej, umożliwiającej pracę ze skalpelem.

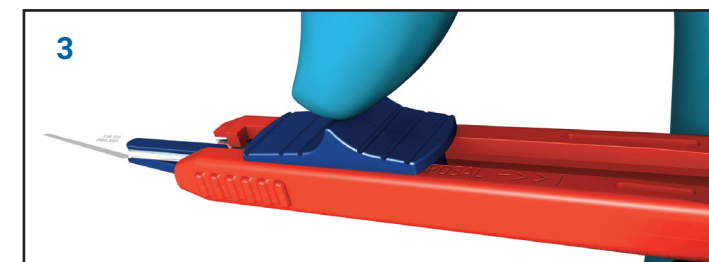

3 Blokada ostrza w pozycji wysuniętej zapewnia stabilną pracę ze skalpelem, a ostrze pozostaje nieruchome nawet przy kontakcie z twardą powierzchnią (np. kością).

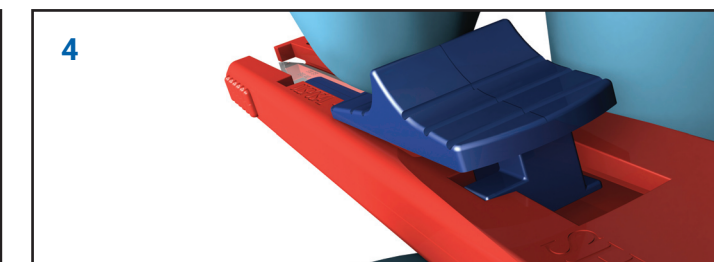

4 Po zakończeniu zabiegu należy przesunąć suwak maksymalnie do tyłu. Przy użyciu odpowiedniej siły nacisku, ostrze zostanie zablokowane na stałe w pozycji schowanej, umożliwiając bezpieczną utylizację skalpela.



Wyroby medyczne oznaczone
znakiem CE zgodnie
z Dyrektywą 93/42/EWG



EMS 633531



ENMS 633525



FM 73368