

JK SURGICAL



PRZEDSTAWICIEL FIRMY

Swann-Morton®



KATALOG PRODUKTÓW



JAKOŚĆ



BEZPIECZEŃSTWO



PRECYZJA

www.jksurgical.pl



Światowy lider w produkcji ostrzy, skalpeli i rękojeści chirurgicznych

J.K. Surgical Sp. z o. o. działa na polskim rynku medycznym od 1994 roku i jest jedynym przedstawicielem angielskiej firmy Swann-Morton w Polsce.

Od początku swojego istnienia dostarczamy najwyższej jakości ostrza, skalpele i rękojeści chirurgiczne, które cieszą się doskonałą opinią wśród naszych odbiorców. Nadrzędnym celem firmy jest szybka i fachowa obsługa wszystkich klientów na terenie całego kraju. Liczba naszych kontrahentów wzrasta nieustannie z roku na rok.

Swann-Morton Ltd. jest światowym liderem w dziedzinie produkcji ostrzy, skalpeli i rękojeści chirurgicznych. Siedziba firmy znajduje się w angielskim Sheffield,

gdzie wytwarza się ok. 1,5 mln ostrzy chirurgicznych dziennie. Zatrudnienie znajduje tam ponad 350 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Firma **Swann-Morton** posiada 90-letnią historię i tradycję popartą szeregiem własnych doświadczeń w dziedzinie produkcji wyrobów chirurgicznych. Obecność produktów Swann-Morton w ponad 100 krajach na całym świecie jest przede wszystkim zasługą najwyższej jakości, która nie ma sobie równych wśród konkurencji.

Wszystkie produkty **Swann-Morton** posiadają międzynarodowe certyfikaty jakościowe i są dopuszczone do obrotu na polskim rynku medycznym.

SPIS TREŚCI

Ostrza chirurgiczne	03
Rękojeści chirurgiczne	05
Skalpele	07
Usuwanie ostrzy	15
Usuwanie szwów	16
Mikrochirurgia i podologia	17
Ostrza bezpieczne BMS Kleen	19
Ortopedia	21
Dermaplaning	22
Przeszczepy skóry	23
Autopsja i histopatologia	26

OSTRZA CHIRURGICZNE

Sterylnie ostrza chirurgiczne Swann-Morton to gwarancja jakości i niezawodności

Dostępne w ponad 35 rozmiarach, w wersji ze stali węglowej oraz stali nierdzewnej. Ostrza pakowane są pojedynczo w folie, w opakowaniach po 100 sztuk. Dzięki szerokiemu wyborowi kształtów oraz rozmiarów, ostrza Swann-Morton stały się wyborem numer 1 we wszystkich dziedzinach chirurgii.

Na każdym ostrzu wygrawerowany jest jego numer wraz z nazwą i krajem producenta. Na opakowaniu pojedynczego ostrza znajdują się dodatkowe informacje, takie jak numer serii oraz data ważności produktu, numer katalogowy produktu, rysunek ostrza oraz oznaczenie numeru ostrza.

Opakowanie zbiorcze zawiera 100szt. i jest oznaczone kolorystycznie, w zależności od rozmiaru i kształtu ostrza, celem ułatwienia użytkownikowi ich identyfikację. Na opakowaniu znajduje się również opis w języku polskim, numer serii oraz data ważności produktu, numer katalogowy produktu, rysunek ostrza oraz oznaczenie numeru ostrza.

Wybrane rozmiary ostrzy Swann-Morton występują także w wersji niesterylnej, w opakowaniach po 100 szt. (pakowane pojedynczo lub w blistrach po 5 szt.). Ostrza niesterylne dostępne są na zamówienie.

KOMPATYBILNE Z RĘKOJEŚCIĄ NR 3

		C/S	S/S
		Kod produktu	
PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	PAKOWANE POJEDYNCZO W BLISTRACH 100 SZT. W OPAKOWANIU	
6	100	0216	0316
9	100	0217	0317
10	100	0201	0301
10A	100	0202	0302
10R	100	-	0390
11	100	0203	0303
11P	100	0291	0391
E/11	100	0225	0325
Sabre E/11	100	0263	-
12	100	0204	0304
12D	100	0218	0318
13	100	0239	0339
14	100	0219	0319
15	100	0205	0305
15A	100	0220	0320
15C	100	0221	0321
15T	100	0292	0392
Sabre D/15	100	0265	-
16	100	0222	0322
40	100	0240	-

KOMPATYBILNE Z RĘKOJEŚCIĄ NR 4

		Kod produktu	
PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	PAKOWANE POJEDYNCZO W BLISTRACH 100 SZT. W OPAKOWANIU	
18	100	0223	0323
19	100	0224	0324
20	100	0206	0306
21	100	0207	0307
22	100	0208	0308
22A	100	0209	0309
23	100	0210	0310
24	100	0211	0311
25	100	0212	0312
25A	100	0215	0315
26	100	0213	0313
27	100	0214	0314
36	100	0236	-

OSTRZA CHIRURGICZNE

- Sterylne, stal węglowa (C/S)
- Sterylne, stal nierdzewna (S/S)



Stitch Cutter 6 9 10



10A 10R 11 11P E/11 SE/11 12 12D 13 14 15 15A 15C 15T SD/15 16 40



18 19 20 21 22 22A 23 24 25 25A 26 27 36



STERYLNE OSTRZA DO ŚCIĄGANIA SZWÓW



Krótkie

Średnie

Długie

RĘKOJEŚCI CHIRURGICZNE

Oferta rękojeści Swann-Morton ze stali nierdzewnej zawiera znane i popularne rękojeści nr 3 i 4 oraz ich warianty, w tym m.in. 3L i 4L, które dzięki swojej długości zapewniają większy zakres i zasięg pracy skalpelem. W gamie rękojeści znajdziemy też uchwyt B3, którego ergonomiczny, ośmiokątny kształt zapewnia precyzyjną kontrolę. Rękojeści B3 cieszą się popularnością w chirurgii plastycznej, szczękowo-twarzowej i stomatologicznej.

Najbardziej znane, standardowe uchwyty nr 3 i 4 posiadają wygrawerowaną miarkę, która przydaje się podczas zabiegów chirurgicznych.

Dla profesjonalistów, którzy cenią sobie rękojeści o większych rozmiarach, najlepszym wyborem będą rękojeści 5B oraz 6B, które charakteryzują się szerokim trzonkiem i zapewniają „pewny chwyt”.



N/S		
PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
3	1	0933
3L	1	0913
B3	1	0923
4	1	0934
4L	1	0914
5B	1	0905
6B	1	0906
7	1	0907
9	1	0909



SKALPELE

Sterylnie skalpele jednorazowego użytku dostępne są w trzech wariantach: standardowym, z osłonką oraz Sabre. Zapewniają wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania w różnych środowiskach medycznych, m.in.: na salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, zespołach ratunkowych, itd.

Dodatkowo, skalpele z osłonką oraz skalpele Minor występują w wersjach niesterylnych i opakowaniach zbiorczych. Dzięki temu, mogą być wykorzystywane w niestandardowych, spersonalizowanych zestawach zabiegowych.

Swann-Morton oferuje również szeroką gamę bezpiecznych, jednorazowych skalpeli wysuwanych z charakterystyczną czerwoną rękojeścią. Skalpele wysuwane dostępne są we wszystkich popularnych rozmiarach: 10, 10A, 10R, 11P, 12, 14, 15, 15C, 20, 21, 22, 23, 24 oraz 25A.

Gama bezpiecznych skalpeli wysuwanych Swann-Morton została stworzona z myślą o najnowszych normach bezpieczeństwa. Dyrektywa Rady 2010/32/UE oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. zmierzają do zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej poprzez zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami medycznymi.



Zgodnie z przyjętymi przepisami, pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom dostęp do narzędzi medycznych wyposażonych w mechanizmy bezpieczeństwa i ochrony przed przypadkowymi zakażeniami. Wymagania te spełnia właśnie gama bezpiecznych skalpeli wysuwanych Swann-Morton, w tym najnowszy skalpel do usuwania szwów Stitch Cutter.

- 1 Wyraźnie widoczna, czerwona rękojeść całkowicie osłania ostrze i blokuje je przed przypadkowym wysunięciem, tym samym zapewniając użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo podczas przekazywania skalpela z rąk do rąk.
- 2 Wysunięcie ostrza następuje poprzez naciśnięcie suwaka, przesunięcie go do przodu i zablokowanie ostrza w pozycji wysuniętej, umożliwiając pracę ze skalpelem.
- 3 Blokada ostrza w pozycji wysuniętej zapewnia stabilną pracę ze skalpelem, a ostrze pozostaje nieruchome nawet przy kontakcie z twardą powierzchnią (np. kością).
- 4 Po zakończeniu zabiegu należy przesunąć suwak maksymalnie do tyłu. Przy użyciu odpowiedniej siły nacisku, ostrze zostanie zablokowane na stałe w pozycji schowanej, umożliwiając bezpieczną utylizację skalpela.

STANDARDOWE

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
6	10	0516
9	10	0517
10	10	0501
10A	10	0502
11	10	0503
11P	10	0591
E/11	10	0525
Sabre E/11	10	0563
12	10	0504
12D	10	0518
13	10	0539
14	10	0519
15	10	0505
15A	10	0520
15C	10	0521
15T	10	0592
Sabre D/15	10	0565
16	10	0522
18	10	0523
19	10	0524
20	10	0506
21	10	0507
22	10	0508
22A	10	0509
23	10	0510
Sabre B/23	10	0570
24	10	0511
25	10	0512
25A	10	0515
26	10	0513
Stitch Cutter	10	0526

Z OŚŁONKĄ

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	10	6601
10A	10	6602
10R	10	6690
11	10	6603
12	10	6604
15	10	6605
20	10	6606
21	10	6607
22	10	6608
23	10	6610
24	10	6611

Z OŚŁONKĄ

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	1000	2331
10A	1000	2332
11	1000	2333
11P	1000	2391
12	1000	2334
15	1000	2335
20	1000	2336
21	1000	2341
22	1000	2342
23	1000	2337
24	1000	2339
26	1000	2346

MINOR

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	10	2381
10A	10	2382
11	10	2383
15	10	2385
15A	10	2386
15C	10	2387

MINOR

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	100	2371
10A	100	2372
11	100	2373
15	100	2375
15A	100	2376
15C	-	-

Małe, praktyczne skalpele typu Minor występują z ostrzami 10, 10A, 11, 15, 15A i 15C




Druga strona rękojeści skalpeli jednorazowego użytku posiada praktyczną miarę



Wybrane modele skalpeli jednorazowego użytku dostępne są również w wersji z osłonką z tworzywa sztucznego, która zmniejsza ryzyko przypadkowych skaleczeń



SKALPELE STANDARDOWE

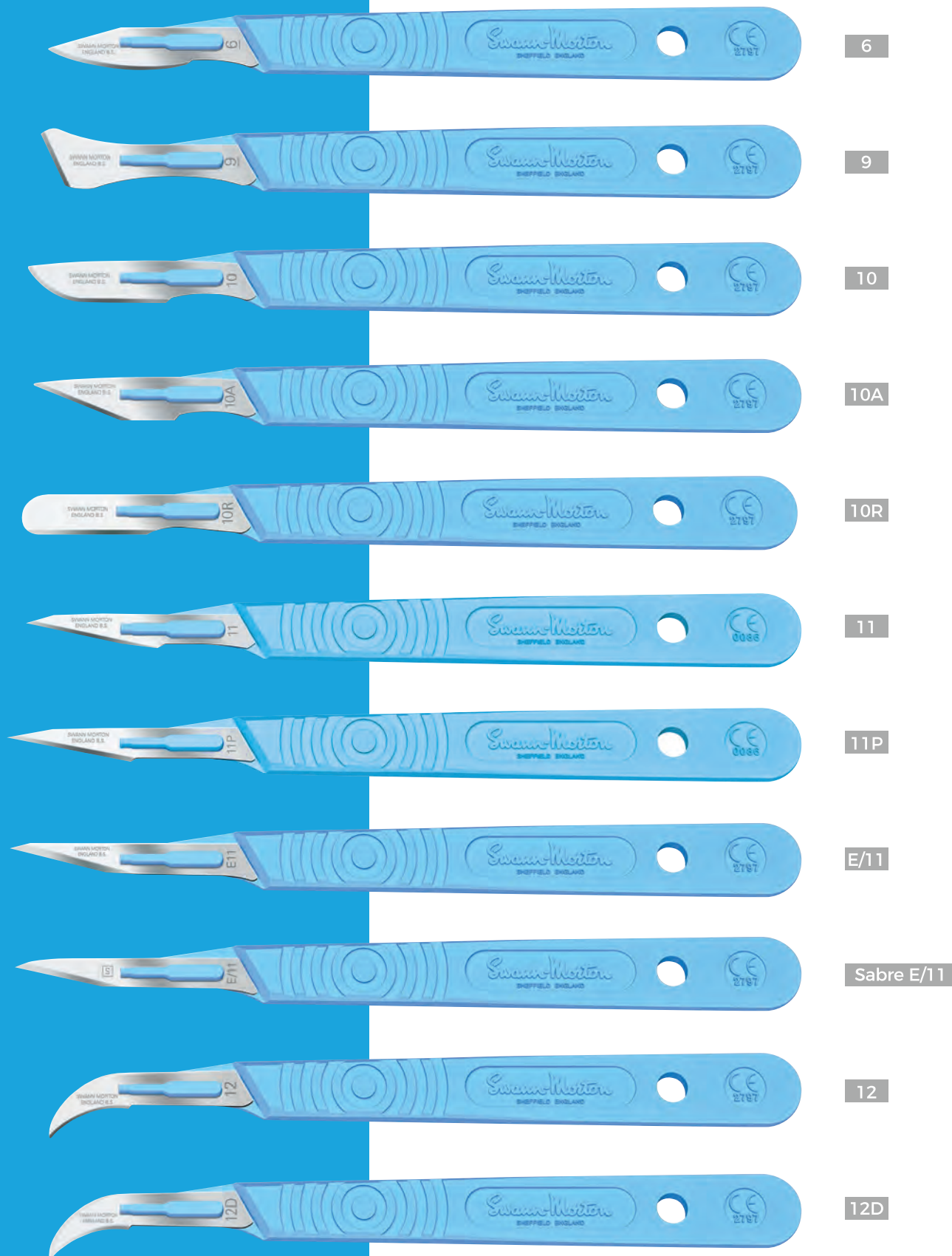

SKALPELE STANDARDOWE



13




14



15




15A

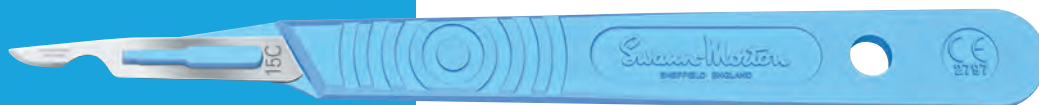

15C



15T

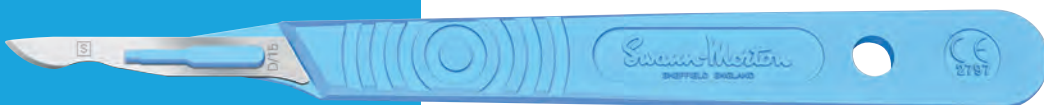

Sabre D/15



16



18




19



20


SKALPELE STANDARDOWE

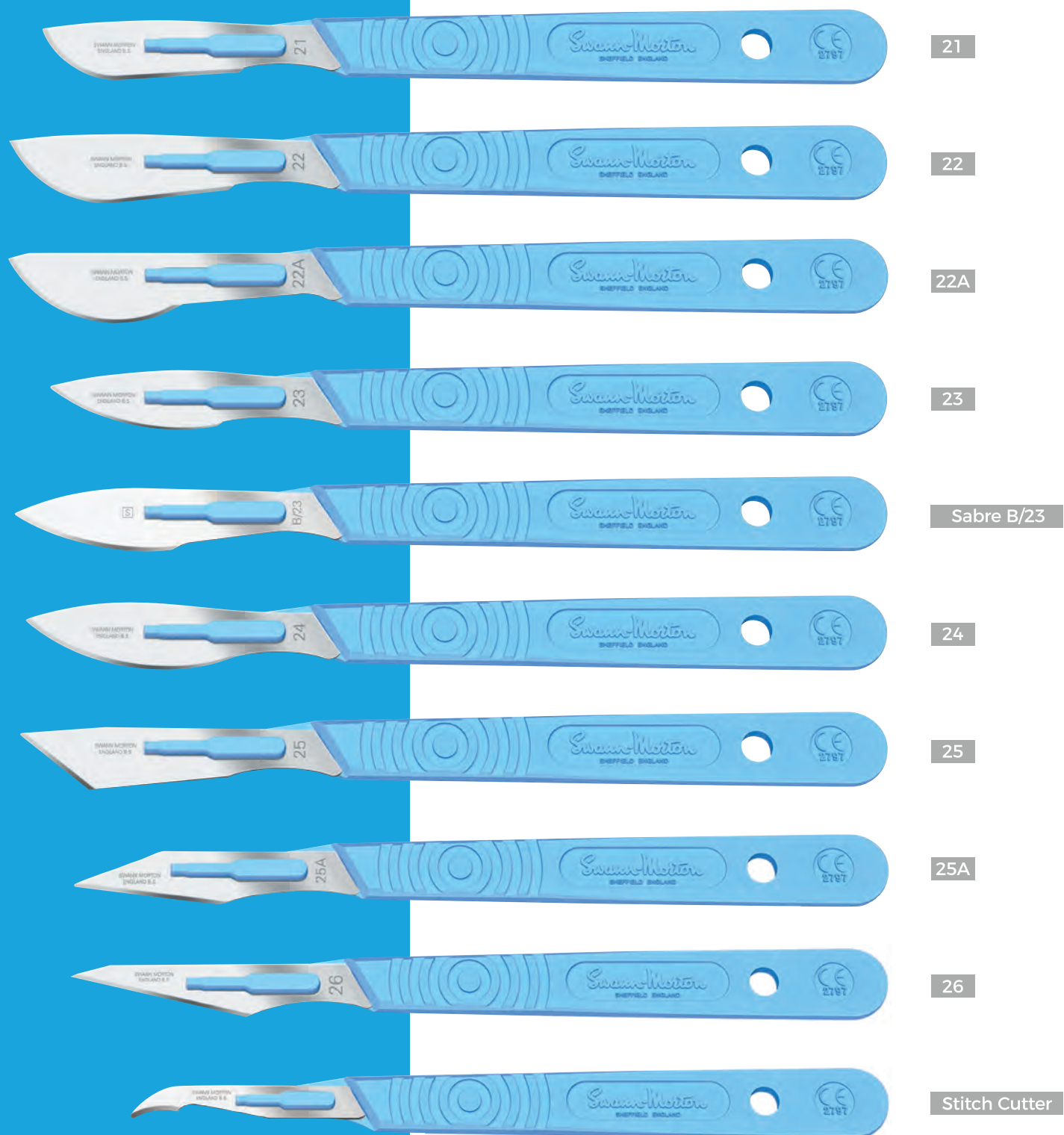

Oznaczenie kolorystyczne skalpeli ułatwia identyfikację rozmiaru ostrza

SKALPELE WYSUWANE


WYSUWANE		S/S		S/S		N/S
PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	10	4901	25	3901	500	4001
10A	10	4902	25	3902	500	4002
10R	10	4990	25	3990	500	4090
11P	10	4991	25	3991	500	4091
12	10	4904	25	3904	500	4004
14	10	4919	25	3919	500	4019
15	10	4905	25	3905	500	4005
15C	10	4921	25	3921	500	4021
20	10	4906	25	3906	500	4006
21	10	4907	25	3907	500	4007
22	10	4908	25	3908	500	4008
23	10	4910	25	3910	500	4010
24	10	4911	25	3911	500	4011
25A	10	4915	25	3915	500	4015
Stitch Cutter	10	4926	25	3926	500	4026

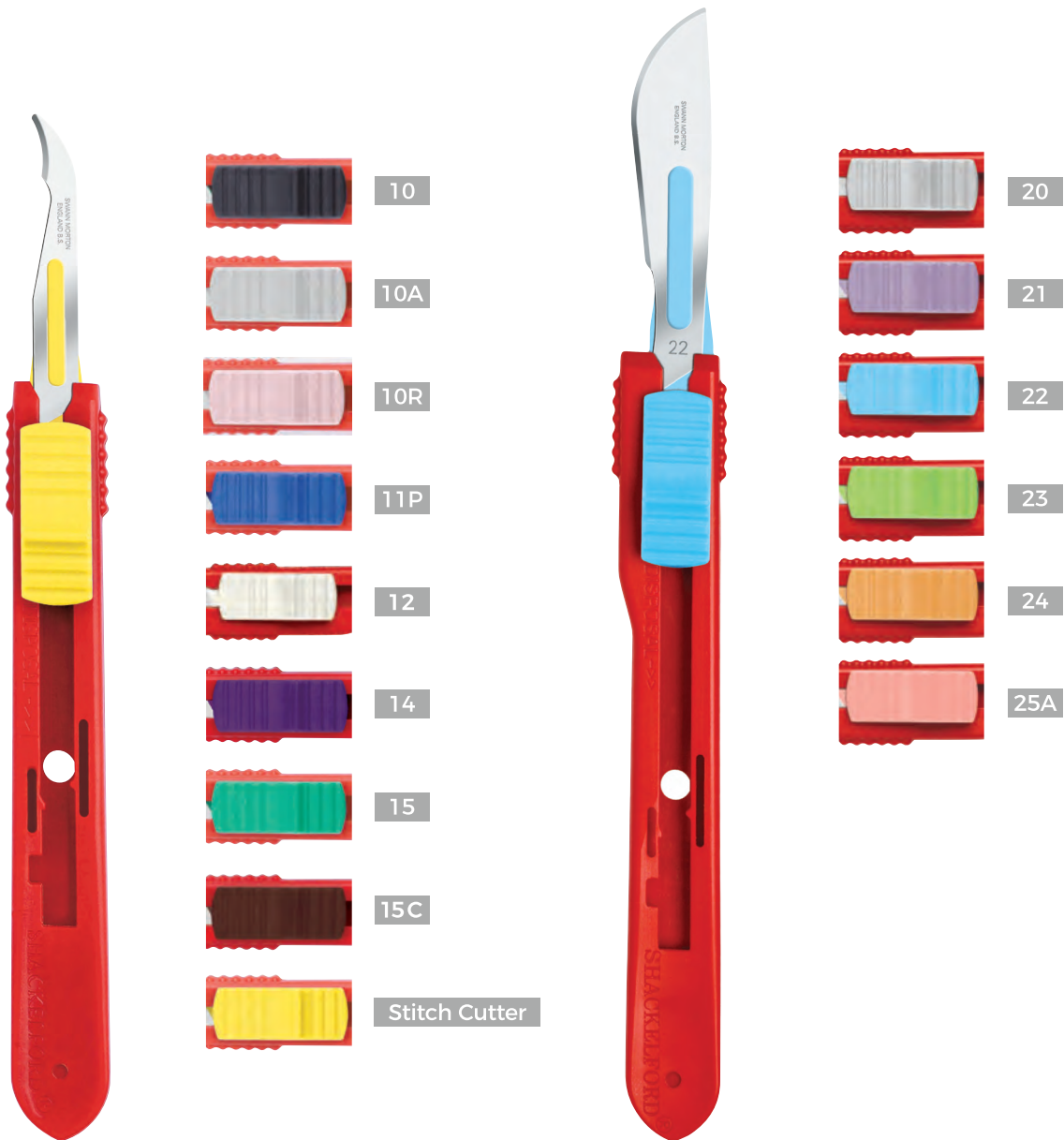

Chroni przed zakażeniami, zapobiega przypadkowym skaleczeniom i zabezpiecza użytkowników.


Jednorazowy, bezpieczny skalpel z przesuwaną osłoną to najnowszy produkt od Swann-Morton zaprojektowany zgodnie z Dyrektywą Rady 2010/32/UE, której celem jest zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska dla pracowników służby ochrony zdrowia poprzez zapobieganie zranieniom ostrymi narzędziami.

Skalpel bezpieczny Swann-Morton minimalizuje ryzyko przypadkowych skaleczeń dzięki przesuwanej, przezroczystej osłonie. Ostrze ze stali nierdzewnej osadzone jest na lekkiej rękojeści z tworzywa sztucznego, która zapewnia stabilny chwyt oraz wyposażona jest w praktyczną miarkę. Skalpel bezpieczny dostępny jest z jedenastoma różnymi rozmiarami ostrzy, w tym również z ostrzem do usuwania szwów (Stitch Cutter). Co więcej, produkt ten występuje w wersji sterylnej - pakowanej po 10 szt. - oraz niesterylnej - w opakowaniach zbiorczych po 500 szt.

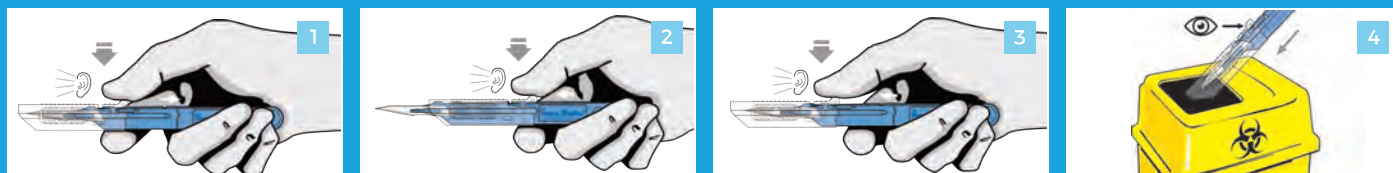

- 1 Trzymaj skalpel w pozycji, w której osłona zabezpieczająca znajduje się z dala od użytkownika. Umieść kciuk na górnej części osłony, a palec wskazujący pod spodem. Ostrożnie naciśnij spust znajdujący się na końcu osłony. Płynnie przesun kciukiem osłonę do siebie (w dół rękojeści), aż osiągnie pozycję końcową, co zostanie potwierdzone słyszalnym kliknięciem. Osłona jest teraz całkowicie schowana, ostrze jest odsłonięte i skalpel jest gotowy do użycia.
- 2 Osłonę zabezpieczającą można w dowolnym momencie ponownie wysunąć, zapewniając ochronę przed zanieczyszczonym ostrzem i przypadkowym zranieniem. Aby ponownie wysunąć osłonę należy nacisnąć spust kciukiem i przesunąć osłonę do przodu, aż do zatrzymania, co zostanie potwierdzone słyszalnym kliknięciem. Ostrze jest teraz zabezpieczone i znajduje się w pozycji umożliwiającej bezpieczne podanie skalpela. Jeśli wymagane jest kolejne użycie ostrza, osłona może zostać ponownie odsunięta.
- 3 Po zakończeniu zabiegu przesun osłonę do przodu, do końcowej, zablokowanej pozycji. Aby zabezpieczyć ostrze przed utylizacją, umieść kciuk za spustem i popchnij osłonę zdecydowanym ruchem dalej do przodu, aż usłyszysz kliknięcie - w ten sposób osłona zostanie zablokowana w pozycji zabezpieczającej.
- 4 Aby potwierdzić, że osłona jest zablokowana w pozycji zabezpieczającej, upewnij się, że strzałki na rękojeści i na osłonie ustawione są w jednej linii. Po zablokowaniu osłony, niemożliwe jest jej ponowne schowanie. Skalpel jest gotowy do utylizacji w odpowiednim pojemniku na ostre narzędzia.

		S/S		N/S
PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	10	3601	500	3501
11	10	3603	500	3503
11P	10	3691	500	3591
12	10	3604	500	3504
15	10	3605	500	3505
20	10	3606	500	3506
21	10	3607	500	3507
22	10	3608	500	3508
23	10	3610	500	3510
24	10	3611	500	3511
Stitch Cutter	10	3626	500	3526

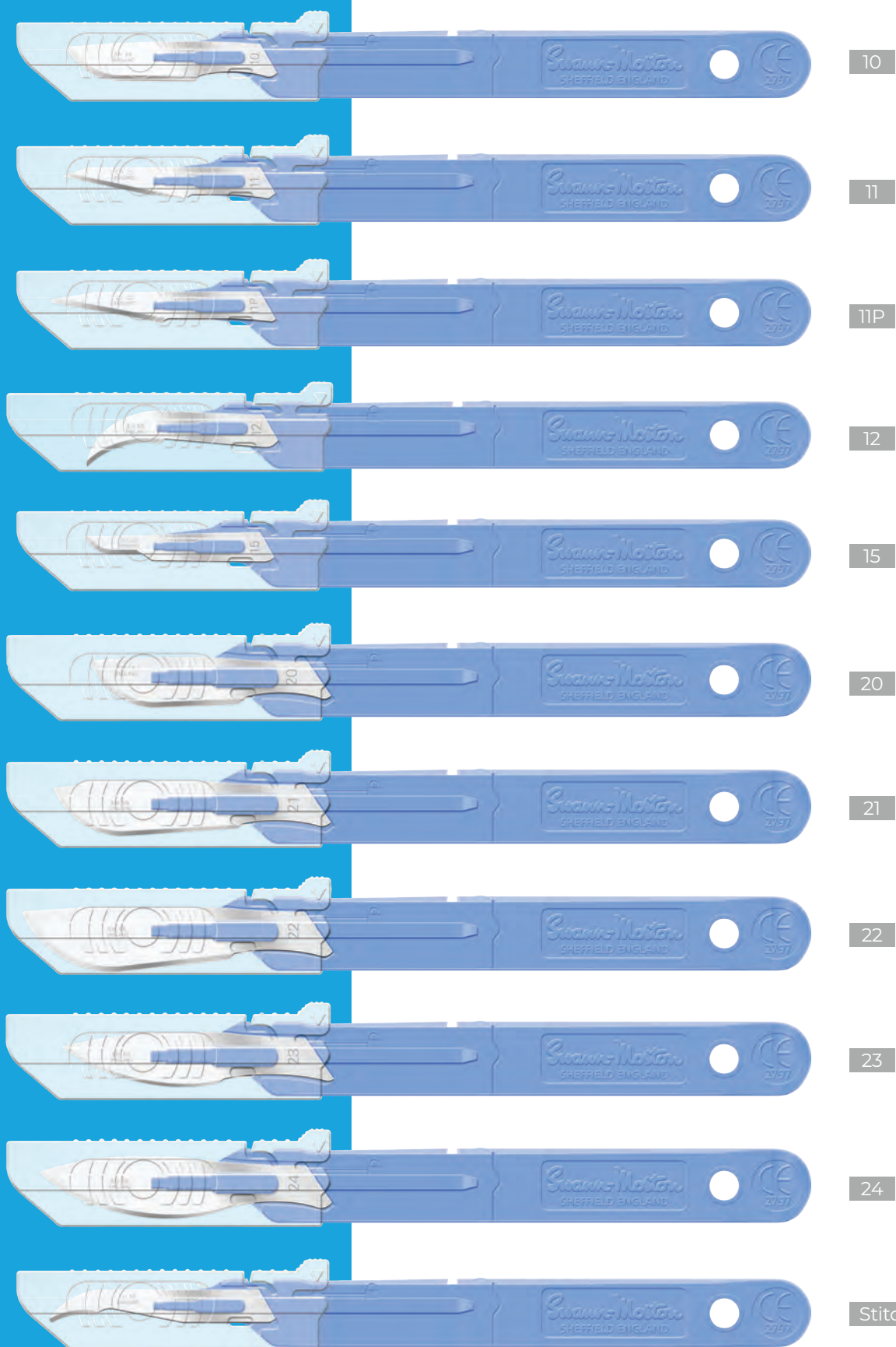

USUWACZE OSTRZY

Sterylny **usuwacz ostrzy Swann-Morton** oraz niesterylny **usuwacz BOX** zostały zaprojektowane, aby bezpiecznie i wygodnie usuwać wszystkie rozmiary ostrzy z rękojeści o mocowaniu nr 3 lub nr 4.

Sterylnie usuwacze ostrzy bardzo dobrze sprawdzają się na salach operacyjnych lub w miejscach wypadków, które wymagają użycia ostrzy chirurgicznych. Przezroczysty materiał umożliwia stały podgląd ostrzy użytych podczas operacji, zapewniając bezpieczeństwo oraz ułatwiając utylizację.

Dzięki swojej plastikowej obudowie, sterylny usuwacz ostrzy zapewnia bezpieczeństwo użytkownika od momentu zdjęcia ostrza z rękojeści aż do ostatecznego umieszczenia go w pojemniku na odpady medyczne – oraz minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.






Ofertę narzędzi do usuwania ostrzy uzupełnia niesterylny, niebieski usuwacz BOX. Jest to przyrząd wielokrotnego użytku, który mieści aż do 100 ostrzy i jest idealnym rozwiązaniem w poradniach, klinikach (w tym także weterynaryjnych) oraz gabinetach kosmetycznych i podologicznych. Usuwacz BOX jest świetnym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają korzystać ze skalpeli oraz pracujących w miejscach, w których natychmiastowa utylizacja ostrzych przedmiotów jest niemożliwa. Po zapełnieniu przyrządu, usuwacz BOX można zutylizować wraz z innymi odpadami medycznymi.

USUWACZE OSTRZY


PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Sterylny usuwacz ostrzy	50	5502
Niesterylny usuwacz ostrzy	100	5505
Niesterylny usuwacz ostrzy	500	5503
Usuwacz ostrzy BOX	1	5525



Usuwacz ostrzy BOX

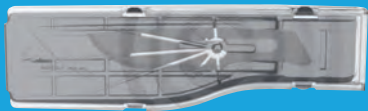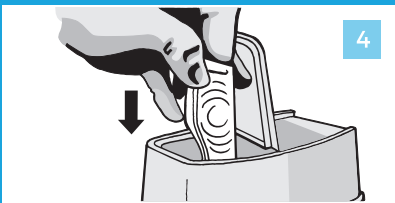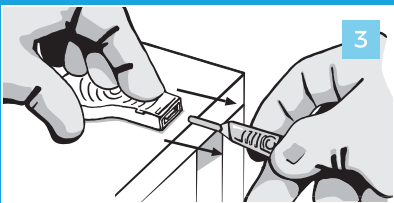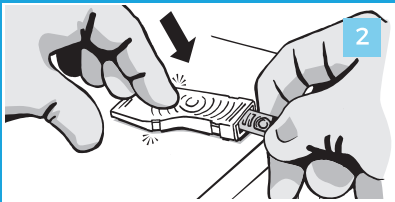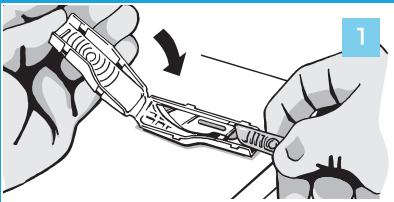

Usuwacz ostrzy

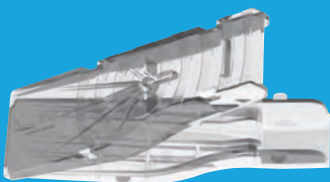

USUWACZE SZWÓW

Wygodne i ergonomiczne ostrza do usuwania szwów Swann-Morton są idealne do użytku w przychodniach stacjonarnych, na oddziałach ratunkowych, oddziałach szpitalnych w praktyce ogólnej oraz w pielęgniarstwie środowiskowym.

Tradycyjne, sterylne ostrza do usuwania szwów ze stali węglowej posiadają specjalną, zagiętą końcówkę, która ogranicza przypadkowe uszkodzenia skóry podczas zabiegu usuwania szwów. Niezwykle ostra krawędź tnąca, charakterystyczna dla wszystkich ostrzy Swann-Morton, przecina szwy z łatwością i chirurgiczną precyzją.

Trzy rozmiary – krótkie (Short), średnie (Midi) i długie (Long) – umożliwiają odpowiedni dobór ostrzy do wielkości rany oraz jej umiejscowienia.


Duża powierzchnia chwytu, oddalona od miejsca rany, pozwala na bardziej aseptyczną technikę usuwania szwów oraz zapewnia lepszą widoczność bez konieczności użycia rękawiczek.

Ostrze do ściągania szwów nr 3 (kompatybilne ze standardową rękojeścią nr 3) jest alternatywą dla pozostałych produktów z tej grupy. Dzięki znacznie mniejszym rozmiarom, ostrze to sprawdzi się idealnie przy usuwaniu niewielkich szwów zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach.

W ofercie Swann-Morton dostępne są również dwa rodzaje skalpeli do usuwania szwów: skalpel jednorazowego użytku Stitch Cutter oraz bezpieczny skalpel wysuwany z plastikową rękojeścią. Skalpele te dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo użytkownika, a po zakończeniu zabiegu utylizowane są w całości.

USUWACZE SZWÓW

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Krótkie	100	0420
Długie	100	0421
Średnie	100	0422
Nr 3	100	0326
Skalpel Stitch Cutter	10	0526
Wysuwany skalpel Stitch Cutter	25	3926

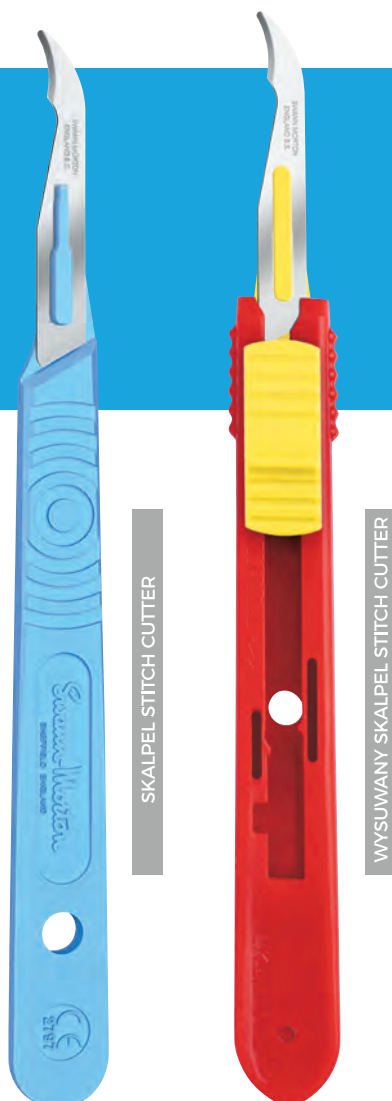

MIKROCHIRURGIA I PODOLOGIA

Ostrza mikrochirurgiczne z serii Fine - jakość i precyzja w standardzie

Ostrza i rękojeści z serii Fine przeznaczone są do wykonywania precyzyjnych i skomplikowanych procedur chirurgicznych. Wykorzystuje się je m.in. do zabiegów z zakresu chirurgii oka, kardiologii, przeszczepu włosów, podologii oraz medycyny estetycznej.

Seria Fine składa się ze specjalnie zaprojektowanych, precyzyjnych ostrzy chirurgicznych ze stali nierdzewnej.

Ostrza dostępne są w wersji sterylnej i pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych po 25 sztuk.

Seria Fine zawiera również sześć rękojeści o różnych długościach. Rękojeści posiadają łatwy system mocowania ostrzy przy pomocy odkręcanej końcówki. Wykonane ze stali nierdzewnej i pakowane pojedynczo w plastikowe etui.

Stosowanie sterylnych i jednorazowych ostrzy chirurgicznych do wszystkich procedur inwazyjnych znacząco zmniejsza ryzyko przenoszenia zakażeń.

Ostrza z serii PD przeznaczone są do standardowych zabiegów z zakresu podologii. Wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 25 sztuk. Kompatybilne z walcową rękojeścią PD o długości 108 mm, umożliwiającą łatwą wymianę ostrzy.

Zastosowania specjalistyczne ostrzy Fine:

Chirurgia sercowo-naczyniowa: SM65, SM65A, SM67.

Chirurgia plastyczna: SM63, SM64, SM67, SM69.

Oftalmologia: SM63, SM64, SM67, SM69.

Ortopedia: SM64, SM65, SM65A.

Laryngologia: SM68, ostrze do myringotomii.

Podologia: SM61, SM61(SB), SM62, SM62(SB), PD81, PD82.

Periodontologia i implantologia: SM65, SM67, SM69.


Przeszczepianie włosów: SP90, SP91.

OSTRZA Z SERII FINE

OSTRZA

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
SM61	25	5901
SM61 (SB)	25	5911
SM62	25	5902
SM62 (SB)	25	5912
SM63	25	5903
SM64	25	5904
SM65	25	5905
SM65A	25	5906
SM67	25	5907
SM68	25	5908
SM69	25	5909
SP90	25	5921
SP91	25	5922
Do myringotomii	10	2102

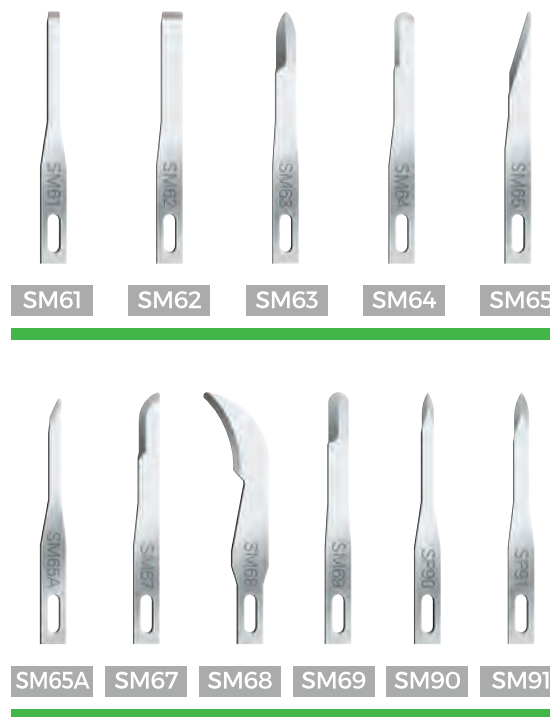


RĘKOJEŚCI

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
SF1	1	6051
SF2	1	6052
SF3	1	6053
SF4	1	6054
SF13	1	6061
SF23	1	6062

RĘKOJEŚCI Z SERII FINE

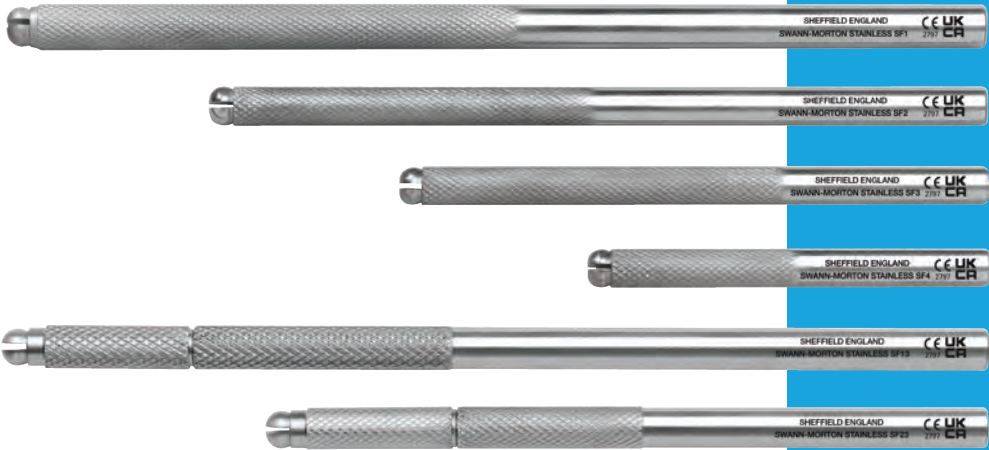

SF1

SF2

SF3

SF4

SF13

SF23

OSTRZA

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
PD81	25	5821
PD82	25	5822

OSTRZA Z SERII PD



PD81

PD82

RĘKOJEŚĆ

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
PD	1	5810

RĘKOJEŚĆ Z SERII PD



PD

OSTRZA BEZPIECZNE BMS KLEEN

SYSTEM OSTRZY BEZPIECZNYCH BMS KLEEN


Innowacyjny system bezdotykowych ostrzy chirurgicznych BMS KLEEN to jeden z elementów oferty produktów bezpiecznych Swann-Morton, które spełniają wszystkie najnowsze normy dotyczące zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami medycznymi.

System BMS opiera się na standardowych ostrzach chirurgicznych, kompatybilnych z popularnymi rękojeściami o mocowaniach nr 3 i 4. Dzięki temu, koszty i trudności związane z jego wdrożeniem zostały ograniczone do minimum.

Ostrza BMS zamknięte są w specjalnej osłonie, którą w łatwy i prosty sposób otwiera się przed rozpoczęciem zabiegu. Po zakończeniu procedury, osłonę zamyka się ponownie, tym samym umożliwiając bezpieczne przekazanie lub utylizację ostrza.

MOCOWANIE


- 1 Ostrza BMS mocuje się do rękojeści B poprzez jej włożenie w tylną część osłony A. Ostrze C zostaje wówczas automatycznie zamocowane na rękojeści. Podobnie jak w przypadku rozwiązań tradycyjnych, mocowanie wymaga użycia odpowiedniej siły. Jednakże, w tym przypadku osłonięta krawędź ostrza całkowicie chroni użytkownika przez przypadkowym skażeniem.

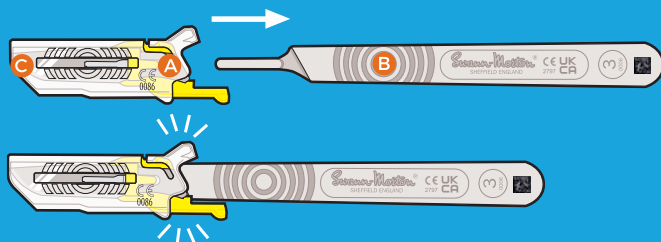

- 2 Charakterystyczny dźwięk „klik” potwierdza, że ostrze zostało prawidłowo zamocowane. Można to również sprawdzić wzrokowo.


WYSUWANIE OSTRZA

- 3 Aby odsłonić ostrze C, należy przesunąć osłonę A poprzez naciśnięcie przycisku D i jednocześnie przesunięcie osłony „do siebie”.

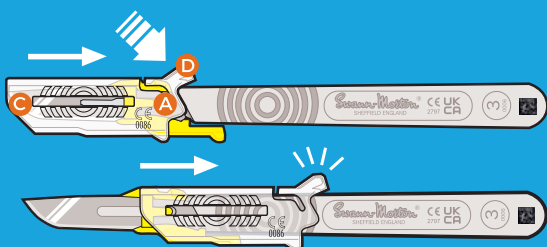


- 4 Charakterystyczny dźwięk „klik” ponownie potwierdzi, że osłona A została całkowicie odsłonięta.

- 5 W obecnej, odsłoniętej pozycji, można przystąpić do wykonywania zabiegu w identyczny sposób jak przy użyciu konwencjonalnego skalpela. W sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie większego nacisku (np. przy nakłuciach), możliwe jest zablokowanie osłony ostrza w pozycji otwartej poprzez przyciśnięcie jej dolnej części F.

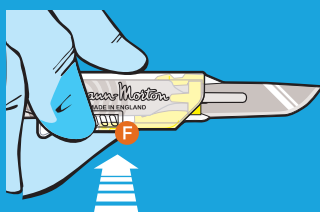

ZAMKNIĘCIE OSŁONY I ZABEZPIECZENIE OSTRZA


- 6 W celu zabezpieczenia ostrza, należy przesunąć osłonę A do pozycji zamkniętej poprzez naciśnięcie przycisku D i przesunięcie osłony „od siebie”.

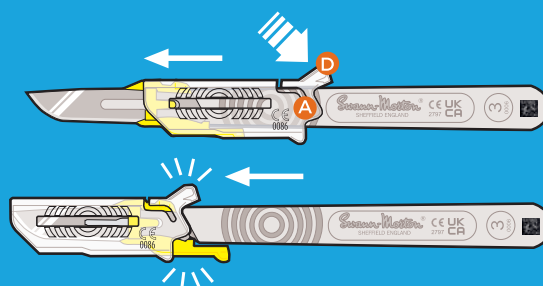

- 7 Charakterystyczny dźwięk „klik” potwierdzi, że osłona została zablokowana w pozycji zamkniętej. Osłonę ostrza można otwierać i zamykać wielokrotnie w celu bezpiecznego przekazywania narzędzia w trakcie zabiegu.


USUWANIE

- 8 Po zamknięciu osłony i zakończeniu zabiegu, ostrze BMS można łatwo i bezpiecznie usunąć z rękojeści. W tym celu, przytrzymaj rękojeść w prawej ręce, kierując krawędź ostrza w dół i „od siebie”. Naciśnij równocześnie na przycisk D oraz blokadę E i zsuń osłonę z rękojeści używając odpowiedniego nacisku.

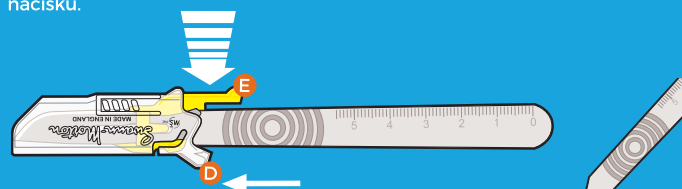

UTYLIZACJA

- 9 Ostrze BMS zamknięte w osłonie można usunąć z rękojeści bezpośrednio do odpowiedniego pojemnika utylizacyjnego.

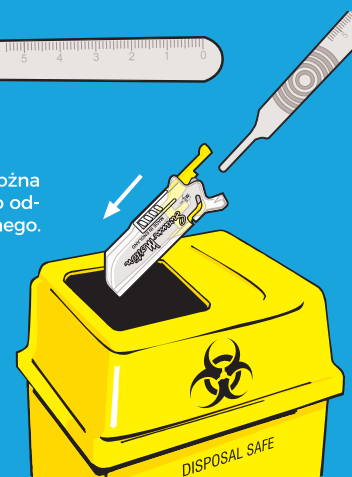

**KOMPATYBILNE
Z RĘKOJĘCIĄ NR 3**

S/S

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10	50	5701	500	5601
11	50	5703	500	5603
11P	50	5791	500	5691
15	50	5705	500	5605
15T	50	5792	500	5692



10



11



11P



15



15T

**KOMPATYBILNE
Z RĘKOJĘCIĄ NR 4**

S/S

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
20	50	5706	500	5606
21	50	5707	500	5607
22	50	5708	500	5608
23	50	5710	500	5610
24	50	5711	500	5611



20



21



22



23




24

Stworzone z myślą o wymagających procedurach ortopedycznych i ogólnych zabiegach chirurgicznych

Seria Cygnetic® zapewnia chirurgom dodatkową siłę i stabilność dzięki opatentowanemu połączeniu specjalnie zaprojektowanego ostrza i rękojeści. Funkcjonalność produktów Cygnetic® ułatwia pracownikom opieki medycznej zakładanie i zdejmowanie ostrzy oraz zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosty demontaż do czyszczenia usprawnia sterylizację.

ŁATWE ZAKŁADANIE

W celu założenia ostrza, podnieś dźwignię do pozycji pionowej i nasłuchuj charakterystycznego kliknięcia, które informuje, że rękojeść jest gotowa do założenia ostrza.

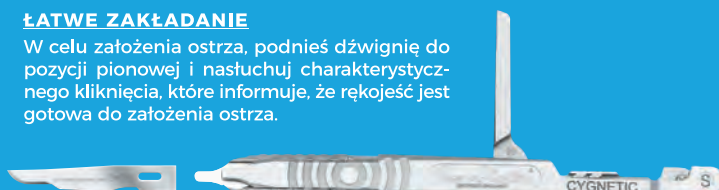

Po nałożeniu ostrza, opuść dźwignię do oryginalnej pozycji nasłuchując kliknięcia, które informuje, że ostrze zostało poprawnie zamontowane i zablokowane.



ŁATWE ZDEJMOWANIE

Aby usunąć zużyte ostrze należy wykonać powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Nie ma potrzeby dotykania zanieczyszczonego ostrza.

ŁATWE ODKAŻANIE

Po użyciu ostrza podnieś dźwignię do pozycji pionowej. Chwyć rękojeść za końcówkę, do której mocowane jest ostrze po czym popchnij dźwignię do przodu i w dół w kierunku od rękojeści. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcia potwierdzające otwarcie rękojeści, co umożliwi rozmontowanie jej na trzy części gotowe do sterylizacji.



W celu ponownego złożenia rękojeści, umieść dźwignię we wgłębieniu o kształcie pół księżyca, która znajduje się przy dolnej krawędzi rękojeści oznaczonej nazwą serii Cygnetic®. Dźwignia powinna być upuszczona do przodu. Następnie umieść górną część rękojeści i wsuń ją tak, aby złączyła się z dolną partią uchwytu, jednocześnie podnosząc dźwignię do pozycji pionowej i uciskając lekko na logo Swann-Morton. Nasłuchuj kliknięcia, które potwierdzi, że trzy części zostały poprawnie złożone. Opuść dźwignię z powrotem do oryginalnej pozycji horyzontalnej. Rękojeść jest gotowa do ponownego użycia.

OSTRZA

S/S

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
CYG 10	50	5301
CYG 11	50	5303
CYG 15	50	5305
CYG 20	50	5306

RĘKOJEŚCI

N/S

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
RĘKOJEŚĆ CYG	1	5398



RĘKOJEŚĆ CYG



DERMAPLANING

Niezawodne przy zabiegach medycyny estetycznej

W odpowiedzi na rosnącą popularność zabiegów medycyny estetycznej, brytyjski producent ostrzy i skalpeli chirurgicznych Swann-Morton zaprojektował ostrze 10R. Jego kształt i rozmiar zostały stworzone specjalnie z myślą o gabinetach kosmetycznych i klinikach medycyny estetycznej.

Dzięki unikalnemu kształtowi i wielkości, **ostrze 10R** doskonale radzi sobie w trudno dostępnych partiach twarzy, gładko przesuwając się po skórze i precyzyjnie zbiera martwy naskórek wraz z niepotrzebnymi włoskami.

Ostrze ma zaokrągloną końcówkę, zapewnia szybką i bezpieczną pracę, zapobiega zadrapaniom i zacięciom oraz pozwala na precyzyjne wykończenie, pozostawiając skórę niezwykle gładką i odświeżoną. 10R cieszy się dużą popularnością m.in. przy derma-

planingu, a także w połączeniu z innymi zabiegami, np. peelingiem chemicznym, czy mikrodermabrazją.

Opakowanie zawiera 100 sztuk ostrzy 10R ze stali nierdzewnej, pakowanych sterylnie w blistry foliowe, z oznaczeniem kształtu i rozmiaru.

Do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej przeznaczone są również ostrza nr 14. Oba te produkty można wykorzystywać w połączeniu ze standardową rękojeścią nr 3 lub w formie praktycznych skalpeli jednorazowych - standardowych oraz wysuwanych.

OSTRZA

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
10R	100	0390
14	100	0319

OSTRZA DO DERMAPLANINGU



RĘKOJEŚĆ

N/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Rękojeść nr 3	1	0933

RĘKOJEŚĆ DO DERMAPLANINGU



SKALPELE

S/S

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Skalpel z osłonką 10R	10	6690
Skalpel 14	10	0519
Skalpel wysuwany 10R	10	4990
Skalpel wysuwany 10R	25	3990
Skalpel wysuwany 14	10	4919
Skalpel wysuwany 14	25	3919

SKALPELE DO DERMAPLANINGU



PRZESZCZEPY SKÓRY

Produkty z serii Skin Graft służą do pobierania z ciała pacjenta zdrowej tkanki skórnej, która następnie wszczepiana jest w miejscu rozległej utraty lub uszkodzenia skóry. Ostrza Skin Graft stosuje się również do celów kosmetycznych oraz zabiegów rekonstrukcyjnych.



Trzy modele rękojeści ze stali nierdzewnej – **Braithwaite, Cobbett i Watson** – są kompatybilne ze sterylnymi ostrzami **Skin Graft 158 mm**, które świetnie się sprawdzają się przy pobieraniu tkanki skórnej. Dzięki regulowanej osłonie, noże umożliwiają ograniczenie maksymalnej grubości pobieranego przeszczepu w zależności od właściwości skóry w miejscu pobrania.

Mniejsza, „miniaturowa” **rękojeść ze stali nierdzewnej Silvers** jest dostępna z charakterystycznym niebieskim uchwytem (do sterylizacji w autoklawie) lub z litą ręczką ze stali nierdzewnej. Rękojeści Silvers zostały pierwotnie opracowane przez H.L. Silver w Toronto w Kanadzie.

Specjalnie zaprojektowane **ostrze chirurgiczne ze stali nierdzewnej Silvers** posiada krawędź tnącą o rozmiarze znaczka pocztowego 1 1/2 cala (4 cm). Grubość ostrza jest zbliżona do innych ostrzy do przeszczepów skóry, takich jak ostrze 158 mm (9940) i zapewnia użytkownikowi większą stabilność oraz zapobiega wystąpieniu rozdarcia lub zwijania się skóry podczas jej pobierania. Ostrza Silvers przeznaczone są do pobierania małych, skomplikowanych przeszczepów z obszarów takich jak: ucho, grzbiet dłoni lub skóra głowy, które nie byłyby dostępne przy użyciu większych, standardowych noży. Pomimo tego, że ostrze Silvers stosowane jest głównie w chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej oraz operacjach jamy ustnej, może być ono również wykorzystywane do oczyszczania ran.

Seria ostrzy do dermatomów przeznaczona jest do chirurgicznego usuwania uszkodzonej tkanki skórnej i przeszczepu zdrowej tkanki z innego miejsca pobrania.

Ostrza do dermatomów dostępne są w trzech wariantach – jednosegmentowym 25 mm (9943), dwusegmentowym 50 mm (9944) i trzysegmentowym 75 mm (9945). Pakowane są pojedynczo w folie ochronne, po 10 szt. ostrzy w opakowaniu. Ostrza Swann-Morton są kompatybilne z większością wiodących marek noży do dermatomów.

Sterylnie ostrze do przeszczepu skóry SG3 Minor może być używane w połączeniu ze standardową rękojeścią chirurgiczną nr 3. Zostało zaprojektowane z myślą o oczyszczaniu ran poparzeniowych i powypadkowych.

Ostrze SG3 Minor, ze względu na swój niewielki, praktyczny rozmiar, stosowane jest również przy zabiegach dłoni i stóp u małych dzieci, a także podczas precyzyjnych zabiegów na oddziałach histopatologii. Wyposażone jest w standardowe mocowanie nr 3, dzięki czemu jest kompatybilne z rękojeściami nr 3, 3L, 5B, 7, 9, B3 i B3L.

Najnowszym dodatkiem do gamy produktów Swann-Morton, stworzonych do leczenia oparzeń i chirurgii rekonstrukcyjnej, jest **sterylny skalpel jednorazowego użytku SGD**.

Dwustronne ostrze przeznaczone do mniejszych przeszczepów skóry, połączone na stałe z wygodną, plastikową rękojeścią, zostało pierwotnie zaprojektowane z myślą o ograniczaniu występowania infekcji pozabiegowych u niemowląt poddawanych obrzezaniu. Od tego czasu stało się ono nieodzownym elementem powszechnie dostępnych zestawów zabiegowych. Skalpele SGD pakowane są pojedynczo w folię ochronną, po 10 szt. w opakowaniu.

Duża popularność jednorazowych, sterylnych skalpeli SGD sprawiła, że do oferty Swann-Morton wprowadzone zostało również **dwustronne ostrze SGD ze stali nierdzewnej**, które można wykorzystywać w połączeniu ze standardową rękojeścią chirurgiczną nr 3.

Sterylnie ostrza SGD pakowane są pojedynczo w folie ochronne, po 20 szt. w opakowaniu.



OSTRZA DO PRZESZCZEPÓW SKÓRY

SKIN GRAFT

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Ostrze SGD	20	2203
Ostrze 1-segmentowe	10	9943
Ostrze 2-segmentowe	10	9944
Ostrze 3-segmentowe	10	9945
Ostrze SG3	20	2201
Ostrze Silvers	10	9942
Ostrze Major 158 mm	10	9940

Ostrza do przeszczepów skóry

Ostrza do przeszczepów skóry wykonane są ze stali nierdzewnej i są kompatybilne z nożami do przeszczepów skóry typu Braithwaite, Cobbett i Watson lub z rękojeściami o mocowaniach nr 3. Dostępne w opakowaniach po 10 lub 20 szt.



Ostrze SGD



Ostrze 1-segmentowe



Ostrze 2-segmentowe



Ostrze 3-segmentowe



Ostrze SG3



Ostrze Silvers



Ostrze Major 158 mm

RĘKOJEŚCI I SKALPELE DO PRZESZCZEPÓW SKÓRY

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Rękojeść Silvers	1	9911
Rękojeść Silvers Stainless	1	9912
Skalpel SGD	10	0527

SKIN GRAFT

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Rękojeść Watson	1	9903
Rękojeść Cobbett	1	9902
Rękojeść Braithwaite	1	9901
Zestaw Watson	1	9906
Zestaw Cobbett	1	9905
Zestaw Braithwaite	1	9904



Rękojeść Silvers



Rękojeść Silvers Stainless



Skalpel SGD



Zestaw Watson



Zestaw Cobbett



Zestaw Braithwaite

AUTOPSJA I HISTOPATOLOGIA

W szerokiej ofercie ostrzy i rękojeści Swann-Morton znajdują się dwie serie produktów przeznaczonych do autopsji. Serie PM40 i PM60 są powszechnie wykorzystywane przez patologów podczas sekcji kryminalistycznych i klinicznych oraz do diagnostyki pośmiertnej. Jakość produktów PM spełnia te same wysokie standardy, z których Swann-Morton jest znany wśród lekarzy i pokrewnych zawodów medycznych na całym świecie. Zaokrąglona końcówka ostrzy PM40B i PM60B zapewnia jeszcze lepsze bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko przypadkowych skaleczeń w miejscu pracy. Uzupełniając ofertę ostrze nr 22B jest kompatybilne ze standardową rękojeścią nr 4 ze stali nierdzewnej.

Wytrzymałe ostrza PM40 i PM40B, wykonane ze stali węglowej, znajdują szereg zastosowań w diagnostyce pośmiertnej. Oba ostrza są kompatybilne z rękojeściami PM40 - standardową niebieską lub platerowaną - wyposażonymi w tradycyjne mocowanie śrubowe. W ofercie dostępna jest również rękojeść PM40 Stainless z litej stali nierdzewnej, którą można sterylizować w autoklawie, z mocowaniem śrubowym wbudowanym tylko w górnej części. Rękojeści pakowane są pojedynczo, w ochron-

nych plastikowych opakowaniach. Średnia długość rękojeści to 220 mm.

Alternatywą dla rękojeści PM40 jest lekki uchwyt PM8, wykonany ze stali nierdzewnej, ze standardowym mocowaniem „chirurgicznym”. Rękojeść ta jest pakowana pojedynczo, w ochronnych plastikowych opakowaniach i pasuje do ostrzy PM60 i PM60B ze stali węglowej. Długość rękojeści z ostrzem wynosi około 185 mm. Seria PM40 jest preferowanym wyborem patologów w Polsce.

OSTRZA DO AUTOPSJI I HISTOPATOLOGII



OSTRZA

N/S

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
PM40	10	2551
PM40B	10	2552
PM60	50	2560
PM60B	50	2561
PM22B	100	2590

SKALPELE I RĘKOJEŚCI

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
PM40 Stainless	1	2650
PM40 Standard	1	2652
PM8	1	2609

PRODUKT	ILOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Skalpel PM40	5	2580
Skalpel PM40	100	2582
Skalpel PM40B	5	2581
Skalpel PM40B	100	2583

PM40 Stainless



PM40 Standard



PM8



Skalpel PM40



Skalpel PM40B






Skalpel Post Mortem chroniący przed zakażeniami

Niesterylny skalpel jednorazowego użytku Post Mortem to najnowszy dodatek do rosnącej gamy noży do histopatologii i autopsji.

Dzięki łatwej do usunięcia osłonie, ostrze pozostaje zabezpieczone aż do rozpoczęcia zabiegu. Użytkownik nie musi mocować ostrza na rękojeści, a po zakończeniu pracy może bezpiecznie zutylizować cały skalpel. Skalpele jednorazowe Post Mortem,

w charakterystycznym granatowym kolorze, przeznaczone są głównie dla przypadków, w których istnieje wysokie ryzyko zakażenia. Mogą być wyposażone w ostrze PM40 lub PM40B Bull Nose.

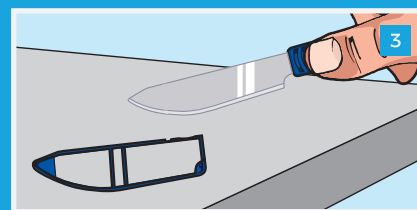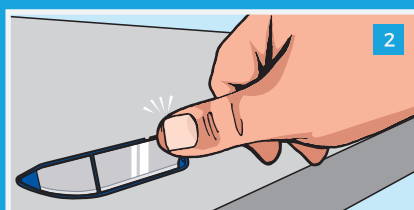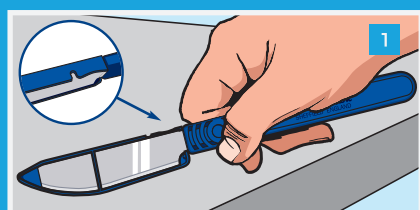

Nowa seria **rękojeści Ergonomic** została zaprojektowana, aby zmaksymalizować wydajność pracy. Specjalna, teksturowana powierzchnia rękojeści ułatwia chwyt oraz zwiększa komfort użytkownika, jednocześnie minimalizując zmęczenie podczas pracy.

Rękojeści Ergonomic znajdują zastosowanie w histopatologii, autopsji i laboratoriach. Mogą być sterylizowane w autoklawie, co pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia krzyżowego próbek. Zastosowanie odmiennej kolorystyki umożliwia łatwą identyfikację poszczególnych rękojeści.



RĘKOJEŚCI		N/S
PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Ergonomic 5	1	1003
Ergonomic 6	1	1004
Ergonomic 8	1	2618

Ergonomic 5
Mocowanie nr 3



Ergonomic 6
Mocowanie nr 4



Ergonomic 8
Ostrza PM60 i PM60B



OSTRZE

S/S

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Ostrze do biopsji szyjki macicy	10	2001

Ostrze Swann-Morton Cervical Biopsy służy do wstępnej diagnozy schorzeń szyjki macicy, które wymagają pobrania próbki tkanki o większych rozmiarach, np.:

- śródnamionkowej neoplazji szyjki macicy (CIN),
- zmian gruczolowych,
- usuwania polipów.

Sterylnie ostrze ze stali nierdzewnej do biopsji szyjki macicy Swann-Morton jest kompatybilne z rękojeściami Major Short i Major Long ze stali nierdzewnej. Unikalny kształt i podwójna krawędź tnąca umożliwiają cięcie zarówno zgodnie, jak i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Ostrze zostało zaprojektowane z myślą o biopsji stożkowej, która polega na pobraniu z szyjki macicy fragmentu materiału tkankowego w kształcie stożka.

OSTRZE DO BIOPSJI SZYJKI MACICY



Ostrze do biopsji szyjki macicy

RĘKOJEŚCI

N/S

PRODUKT	IŁOŚĆ SZT. W OPAK.	KOD PRODUKTU
Major S	1	0639
Major L	1	0640




RĘKOJEŚCI Z SERII MAJOR



MAJOR S



MAJOR L

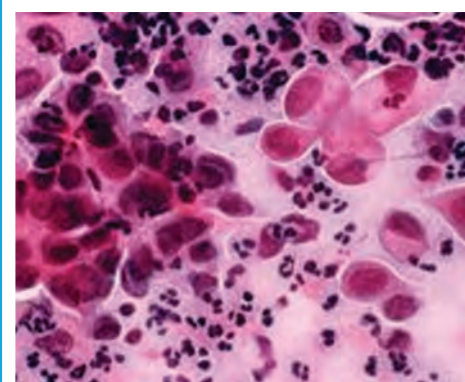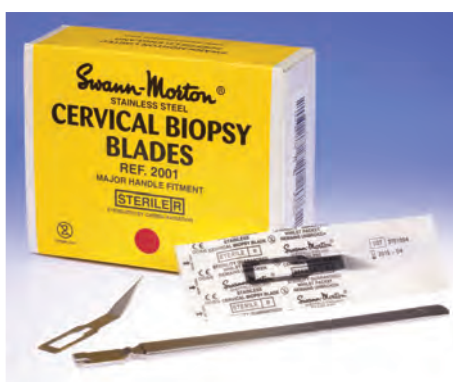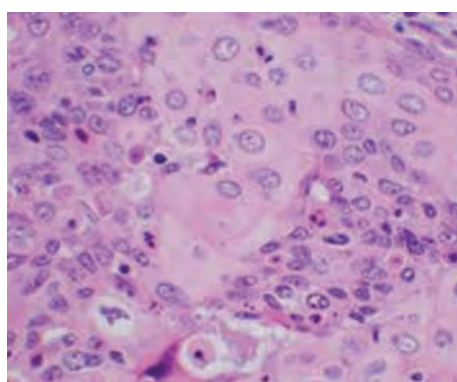



ODWIEDŹ NAS NA STRONIE WWW



JK SURGICAL Sp. z o.o.
ul. Żlebowa 8, 60-115 Poznań
NIP: PL7790045100
REGON: 630178983

tel./fax +48 61 867 97 81
e-mail: biuro@jksurgical.pl
www.jksurgical.pl